


## Protocole de TP

### Observer des nématodes (montage dans une boîte de Pétri)

► **Matériel nécessaire :**

- un peu de litière forestière ou de compost bien mûr
- des mouchoirs en papier
- des tamis
- des boîtes de Pétri
- des pipettes Pasteur en plastique
- lames, lamelles, microscopes
- loupe binoculaire

► **Montage :** (ce TP doit se préparer la veille)

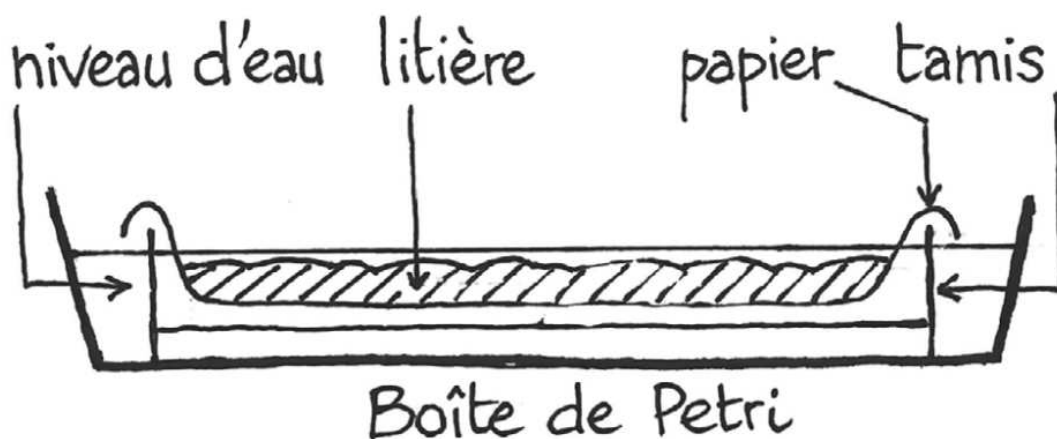

### ► Protocole :

1. Installer la veille le montage comme indiqué sur le schéma ci-dessous avec, dans l'ordre :
  - une boîte de Pétri,
  - un tamis,
  - des feuilles de mouchoir en papier dissociées et recoupées pour qu'elles ne dépassent pas du tamis,
  - un peu de litière ou de compost.
2. Recouvrir d'eau.
3. Le lendemain, enlever délicatement le tamis.
4. On peut soit observer directement la boîte de Pétri à la loupe binoculaire, soit prélever quelques gouttes d'eau à la pipette Pasteur et les mettre entre lame et lamelle au microscope.